




StimuLITE®

CLASSIC BARIATRIC


TOTAL PRESSURE MANAGEMENT

Max brukarvikt 360 kg

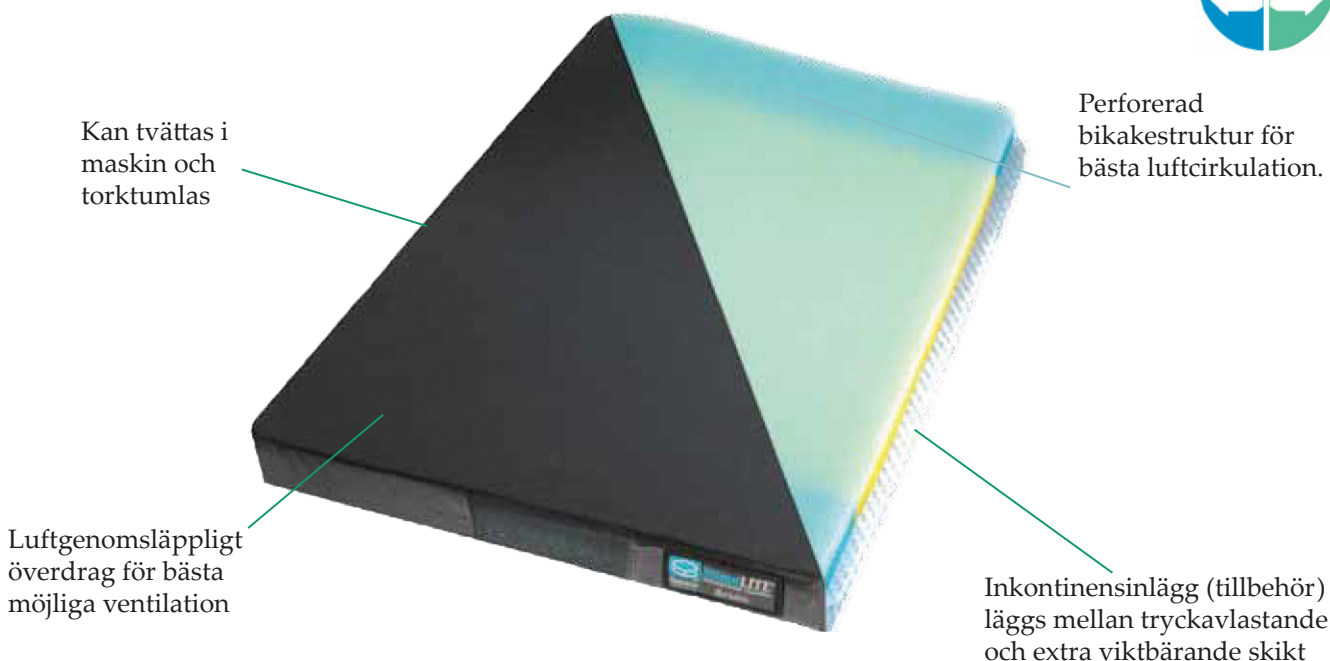

LÄTT OCH LUFTIG MED ENASTÅENDE KOMFORT

StimuLITE® Classic Bariatric sittdyna är utvecklad speciellt för tunga personer, maxvikt 360 kg. StimuLITE Classic Bariatric dyna lämpar sig även för andra personer med hög decubitusrisk i behov av en plan och mycket stabil sittdyna. StimuLITE Classic Bariatric sittdyna med bikakestruktur

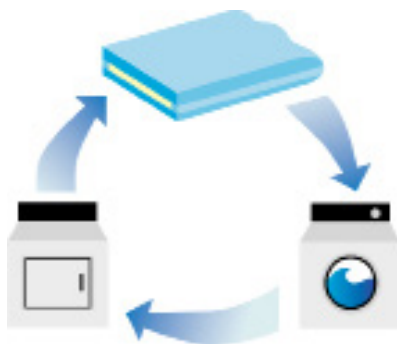

har mycket låg vikt för hur mycket vikt den kan bära och bjuder på optimal tryckutjämning och komfort. Dynans vikt ligger under 3 kg, eftersom det använda materialet (100% Thermoplastisk Polyuretan) är mycket lätt. Två olika fasta lager av bikakestrukturen utgör dynbasen. Det följsamma, toplagret låter sittbensknölna sjunka in i dynan och stödjer samtidigt kroppen; det styva botten lagret är mycket bärkraftigt och förhindrar att man sitter igenom. Resultatet blir en anpassning av dynan till kroppen, vilket leder till en jämn tryckfördelning och utomordentligt stabilitet för användaren. Som förstärkning är fastare material inarbetat i sidorna. Materialet är antibakteriellt

och minskar uppkomsten av lukt vid regelbunden rengöring. Dynan och överdraget är maskintvättbara i 40° och kan torktumlas. För inkontinensproblem finns ett inkontinensinlägg som placeras in i dynan mellan top- och botten skikten. Både överdraget

och dynbasen tål kontakt med urin. Den främsta orsaken till att trycksårsproblem uppstår är tryck, skjuvkraft och fukt vilket gör huden skör. StimuLITE Classic Bariatric minskar tryckbelastning, reducerar uppkomna skjuvkrafter och friktion, samt avleder fukt vilket håller huden stark. Den perforerade bikakeformen främjar luftcirkulationen som avleder fukt. Ett luftgenomsläppligt överdrag med öppningar runt om på sidorna kompletterar effektivt detta ventilationssystem.



Total Pressure Management™


Förebygger Hudskörhet

Fuktighet mjukar upp huden och gör den skör. Fuktighet uppstår av svett och kroppsvätska.

Genom det unika ventilationsystem som StimuLITE Classic Bariatric sittdyna och överdrag erbjuder, kan luft cirkulera och fuktighet avdunsta. Sittdynans konstruktion med de perforerade cellerna i bikakestruktur (honeycomb) tillåter luft att cirkulera. Detta gör att användaren kan hålla sin torr och sval. Dynan och överdraget kan maskintvättas och torktumlas vilket underlättar god hudhygien.



Andas och avdunstar fukt.

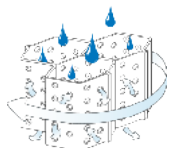


Komplett ventilationsystem

Tryckutjämning


StimuLITE Classic Bariatric sittdynans cellkonstruktion formar sig efter kroppen och fördelar trycket över en större yta, vilket också ger en mycket god komfort.

StimuLITE Classic Bariatric sittdyna har en hög höjd på cellerna vilket betyder att personer utan känsel eller i hög risk att få trycksår kan använda sittdynan även under förekomst av trycksår upp till sårgrad 3.

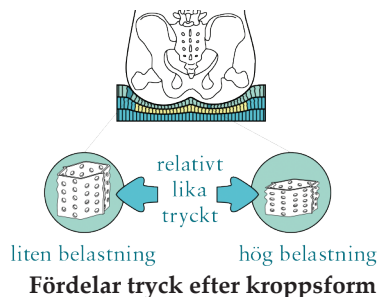

Reducerar skjuvkraft

Dynans laterala styvhet avgör hur mycket skjuvning och stabilitet dynan får. För mycket styvhet ökar skjuvkraften. Två separata lager i olika styvhet i StimuLITE Classic Bariatric dynan minimerar skjuvningen utan att göra avkall på stabiliteten. Det övre lagren har en mindre lateral styvhet för att minska skjuvkraften mot huden. Det nedre lagret har större horisontalstyvhet för optimal stabilitet. Dynans stretchbara överdrag fungerar tillsammans med dynans överskikt till en minimal skjuvkraft mot huden.

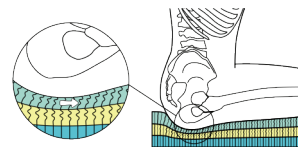

minimal skjuvkraft mot vävnader
Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE Classic Bariatric

StimuLITE Classic Bariatric Sittdyna är mycket bärkraftigt, har låg vikt för sin klass, är nästan skötselfri, och erbjuder mycket bra tryckutjämning även under höga påfrestningar. Dynan är lätt att hålla ren och kan spolas av med tvål eller fintvättmedel, vilket underlättar för inkontinenta personer. Dynan lufttorkas, med lagren delade. Cellkonstruktionen erbjuder individuell anpassning och form, fördelar tryck samt ger stabilitet. Dynans perforerade cellkonstruktion tillåter luft att cirkulera och fukt att avdunsta så att sittytan förblir torr. Användaren håller sig torr och sval, även väldig varma personer. Det unika ventilationsystemet reducerar risken för hudskörhet.

Vid isärtagande av dynan tänk på att botten och topplager går att separera men sitter samman med en söm bak på dynan.

StimuLITE Classic Bariatric Sittdynor Storlek (sittbredd x sittdjup) x 7cm

Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
CLBA 2018	51x46 cm	CLBA 2422	61x56 cm
CLBA 2020	51x51 cm	CLBA 2424	61x61 cm
CLBA 2218	56x46 cm	CLBA 2622	65x56 cm
CLBA 2222	56x56 cm	CLBA 2820	71x51 cm
CLBA 2224	56x61 cm	CLBA2828	71x71 cm
CLBA 2418	61x46 cm	CLBA 3022	76x56 cm
CLBA 2420	61x51 cm	CLBA 3026	76x65 cm

Andra storlekar kan fås på beställning. Dynan tillverkas bara med plan botten


Max storlek:
CLBA 3026 (76x65cm)

Överdrag:
Cordura: COVCLBA + storlek
Ullfrotté: WCOVCLBA + storlek
Glidöverdrag: COVOUTCLBA + storlek

StimuLITE Inkontinenslägg Storlek (sittbredd x sittdjup)

Art. Nr.	Storlek
IN 1616	41 x 41 cm
IN 1618	41 x 46 cm
IN 1816	46 x 41 cm
IN 1818	46 x 46 cm
IN 2020	51 x 51 cm
IN 2222	56 x 56 cm
IN 2424	61 x 61 cm

Passar alla dynor, placeras mellan översta och understa lagret inne i överdraget, vita sidan upp!

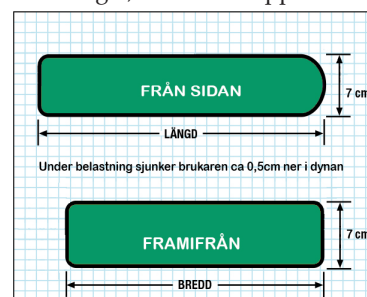

Max brukarvikt 360 kg.



Supracor®

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.



SVENSK MILJÖBAS



Samtliga StimuLITE sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
Fax: 031-52 18 82
goran@rehabshop.com
www.rehabshop.com