




# StimuLITE®

## CLASSIC EXTRA SENSITIVE SITTDYNA

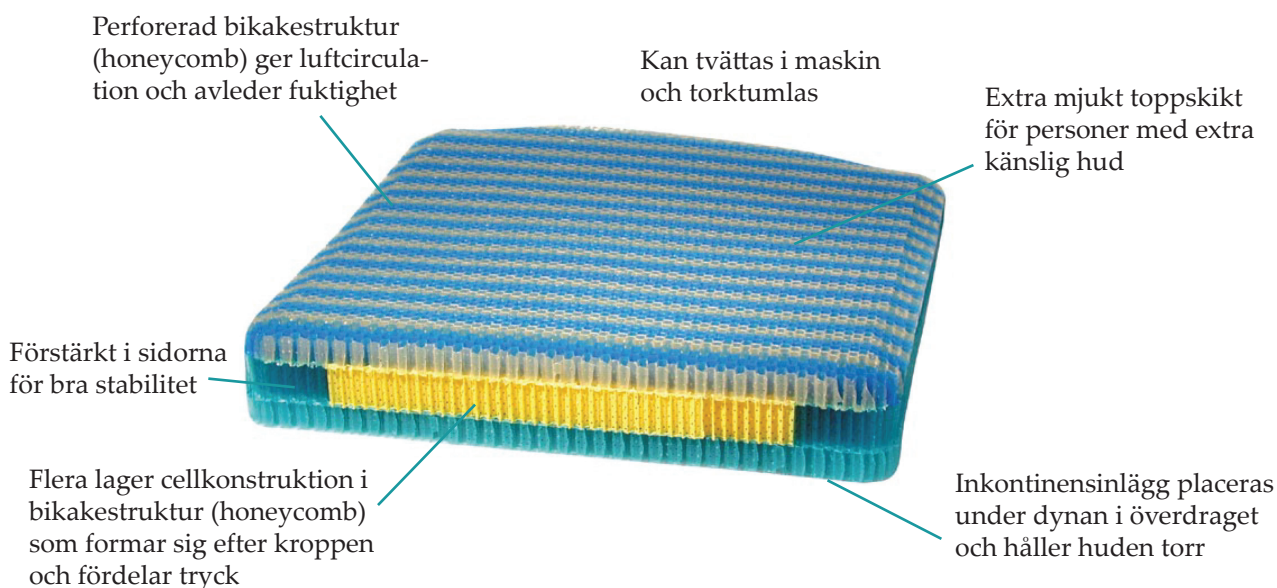

### TOTAL PRESSURE MANAGEMENT

#### UTMÄRKT STABILITET OCH TRYCKAVLASTNING MED ENASTÅENDE KOMFORT

StimuLITE Classic XS sittdyna har ett mjukt toppskikt av följsam Honeycomb, celler i bikakestruktur, för personer med extra känslig hud. Classic XS ger total tryckavlastning - tryckfördelning samt reducerat skjuvning och friktion. Ventilationen avleder värme och fukt samt förebygger och lindrar trycksår. Den lätta dynan är gjord av högklassigt, medicinskt godkänt material 100% TPU, som är antibakteriellt och förhindrar bakteriesvamp och förblir luktfritt efter rengöring. Dynan är maskintvättbar, bifogad tvättpåse används, vilket underlättar att hålla god hygien. StimuLITE Honeycomb är formbar (anisotropisk) och fördelar vikt och tryck samtidigt som den ger utmärkt stabilitet. Honeycomb-cellerna formar sig efter kroppen och är följsamma vid rörelse, för att mildra stötar och skador på vävnader. Cellerna är perforerade så att luft cirkulerar och avleder fukt. Tack vare sin konstruktion består StimuLITE



Classic XS sittdynan av 93% luftvolym. StimuLITE Classic XS sittdyna består av tre lager flexibla sammansvetsade celler. Cellskikten har olika styvhet för att sittbenknölnarna - oberoende av varandra - skall kunna sjunka ned i dynan samtidigt som den omkringliggande huden och vävnaden får stöd. Fastare celler används för att ge ökad sidstabilitet. Ett luftgenomsläppligt överdrag tillsammans med de perforerade cellerna gör att brukaren känner sig sval och bekväm. Idealisk för personer med ömtålig hud. Den plana sittytan underlättar vid sidoförflyttningar. StimuLITE Classic XS sittdyna ändrar inte sina egenskaper vid värme eller kyla, t.ex. blir dynan inte hård om man har glömt den i bilen över natt.

Vid utrangering, återvinn plasten, genom plaståtervinning. StimuLITE CLXS rullstolsdyna har 2 års garanti.



## Total Pressure Management™


### Förebygger Hudskörhet

Fuktighet "mjukar upp" huden och gör den skör. Fuktighet uppstår av svett och kroppsvätska. Genom ett unikt ventilationssystem som StimuLITE



Classic XS sittdyna erbjuder med dess perforerade celler i bikakestruktur (honeycomb) och med ett luftgenomsläppligt överdrag kan luft cirkulera och fuktighet avdunsta. Detta gör att användaren kan hålla sig torr och sval. Dynan och överdraget kan maskintvättas och torktumlas vilket underlättar god hudhygien.

Andas och avdunstar fukt.

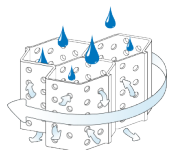


Komplett ventilationssystem

### Tryckavlastning

StimuLITEs cellkonstruktion i bikakestruktur (honeycomb) ger optimal tryckavlastning.


StimuLITE sittdynor avleder tryck genom att distribuera tryck från känsliga områden. Detta resulterar i att utstående sittben känner samma tryck som närliggande kroppsdelar. StimuLITE Classic XS fördelar tryck från sittbenknölar och trochanter till mjukdelar under låren. Ett mjukareskikt bäddar in sittbenknölar och svanskota och förebygger att "sitta igenom".

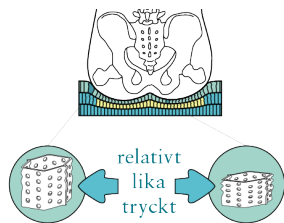

relativt lika tryck  
liten belastning      hög belastning  
Fördelar tryck efter kroppsform

### Reducerar skjuvkraft

Dynans laterala styvhet avgör hur mycket sjuvning och stabilitet dynan får. För mycket styvhet ökar skjuvkraften. Två skikt i olika styvhet i StimuLITE Classic XS dynan minimerar skjuvningen utan att göra avkall på stabiliteten. Det övre skiktet har en mindre lateral styvhet för att minska skjuvkraften mot huden. Den nedre skikten har större horisontalstyvhet för optimal stabilitet. Dynans stretchbara överdrag fungerar tillsammans med dynans överkikt till en mild skjuvkraft mot huden.

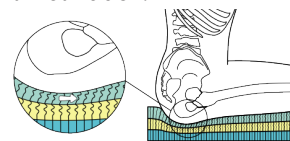

minimal skjuvkraft mot vävnader  
Diffus lateral skjuvkraft

## StimuLITE Classic XS Sittdyna

StimuLITE Classic XS sittdyna har låg vikt och kräver lite skötsel samt erbjuder mycket bra tryckutjämning. Den är lätt att hålla ren och kan tvättas i maskin samt torktumlas, vilket underlättar för inkontinenta personer. StimuLITE Classic XS sittdyna består av tre olika skikt, vilket erbjuder individuell anpassning och form, fördelar tryck samt ger stabilitet. Den perforerade cellkonstruktionen i bikakestruktur tillåter luft att cirkulera och fukt att avdunsta. Detta gör att användaren håller sig torr och sval. Det unika ventilationssystemet reducerar hudskörhet och erbjuder optimal trycksårsbehandling. StimuLITE Classic XS rund botten sittdynan tillverks för rullstolar med extrem hängmattesits. Dynan erbjuder samma fördelar som den med rak botten och utesluter behovet av träskiva för att utjämna sittytan.

- \* Låg vikt - ca. 1,5 kg
- \* Mycket stabil
- \* Unikt ventilationssystem
- \* Tvättbar i maskin, torktumlas
- \* Erbjuder optimal tryckutjämning
- \* Max brukarvikt 130 kg

StimuLITE Classic XS Sittdynor			
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 6cm			
Rundad botten +S (CLXS1414S)			
Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
CLXS1414	36x36cm	CLXS1716	43x41cm
CLXS1416	36x41cm	CLXS1717	43x43cm
CLXS1418	36x46cm	CLXS1718	43x46cm
CLXS1420	36x51cm	CLXS1720	43x51cm
CLXS1516	38x41cm	CLXS1816	46x41cm
CLXS1517	38x43cm	CLXS1817	46x43cm
CLXS1518	38x46cm	CLXS1818	46x46cm
CLXS1520	38x51cm	CLXS1820	46x51cm
CLXS1616	41x41cm	CLXS2016	51x41cm
CLXS1617	41x43cm	CLXS2018	51x46cm
CLXS1618	41x46cm	CLXS2020	51x51cm
CLXS1620	41x51cm		


Andra storlekar kan fås på beställning. En rundad botten rekommenderas för rullstolar med hängmattesits mer än 2,5 cm.

Max storlekar:  
CLXS2422 plan botten (61x56cm)  
CLXS2020S rund botten (51x51cm)

Överdrag:  
Cordura: COVCL + storlek  
Ullfrotté: WCOVCL + storlek  
Glidöverdrag: COVOUTCL + storlek

StimuLITE Inkontinensinlägg	
Storlek (sittbredd x sittdjup)	
Art. Nr.	Storlek
IN 1010	26 x 26 cm
IN 1212	31 x 31 cm
IN 1414	36 x 36 cm
IN 1616	41 x 41 cm
IN 1618	41 x 46 cm
IN 1816	46 x 41 cm
IN 1818	46 x 46 cm
IN 2020	51 x 51 cm

Passar alla dynor, placeras under dynan i överdraget, vita sidan upp!

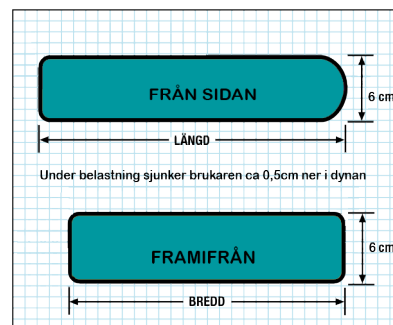

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.



SVENSK MILJÖBAS



Samtliga StimuLITE sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB  
Bultgatan 17  
442 40 KUNGÅLV  
Tel: 031-52 18 95  
Fax: 031-52 18 92  
email: goran@rehabshop.com  
www.rehabshop.se