


StimuLITE®

SITTDYNA FÖR BARN

Låg vikt – 1/2 -1 kg beroende på storlek

Perforerad honeycomb (bikakestruktur) gör att luft cirkulerar och fukt avdunstar

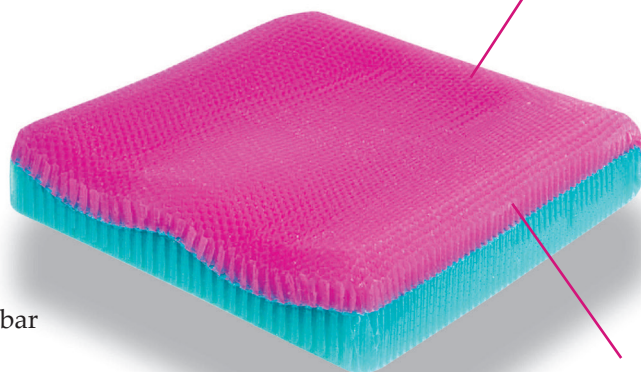


Tvätt- och torkbar i maskin

Honeycomb avlastar tryck genom att anpassa sig till kroppsformen, fördela vikten jämt och dämpa stötar

TOTAL PRESSURE MANAGEMENT

MASKINTVÄTTBAR HONEYCOMB

StimuLITE® Pediatric Contoured är en konturerad Honeycomb Barndyna. Den är sval, torr, bekväm och kan tvättas i maskin en dyna som både föräldrar och barn gillar.

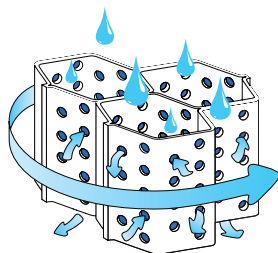

StimuLITE-dynan låter luft cirkulera och fukt avdunsta, och håller barnen svala och torra även i varmt och fuktigt klimat.

Denna lätta och användbara dyna är idealisk för bruk i rullstol och både dyna och överdrag är tvätt- och torkbara i maskin.

StimuLITE barndyna är konstruerad för prestanda och komfort och ger maximal tryckavlastning. Den är baserad på bevisade avlastningsegenskaper i mjukt och flexibelt material som anpassar sig till kroppsformen. Honeycombs naturliga förmåga att ge jämn viktfordelning, återta sin ursprungliga form och vara stötdämpande ger maximal tryckavlastning och hjälper till att förebygga vävnadsskador.

StimuLITE barndyna reducerar inte bara tryck och skjuvning till ett minimum utan även fukt, vilken annars kan leda till hudskörhet. Dynans unika ventilationssystem – perforerad honeycomb i bikakestruktur, och luftgenomsläppligt överdrag med sidonät – gör att

Dynan väger 1/2 - 1 kg, beroende på storlek, och är gjord av termoplastisk polyuretan – ett medicinskt material som motverkar förekomsten av svamp, bakterier och dålig lukt. Ren hud är frisk hud och med dynans antibakteriella egenskaper jämte den bekväma maskintvätten är det lätt att hålla god hudhygien.

För barn med inkontinens kan ett inkontinensskydd placeras inuti överdraget, under dynan. Vätskan dräneras genom dynan och huden hålls torr. StimuLITE barndyna skyddar barn mot trycksår, skjuvning och hudskörhet och ger maximal tryckavlastning.

StimuLITE rullstolsdyna för barn har 2 års garanti.



Total Pressure Management™


Motverkar hudskörhet

Hudskörhet är uppluckrad hud som förorsakas av kontinuerlig exponering för kroppsvätskor eller fukt.

Kraftigt uppmjukad eller skör hud har sämre motstånd mot tryck och orsakar nedbrytning. StimuLITE honeycomb (bikakestruktur) är perforerad, vilket gör att luft cirkulerar genom dynan och fukt avdunstar. Ett överdrag med luftgenomsläpp ventilerar bort fukt och håller huden torr. Både dyna och överdrag är tvätt- och torkbara i maskin och gör det lätt att hålla god hudhygien.




Andas och avdunstar fukt.

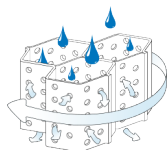

Komplett ventilationssystem

Tryckavlastning


Honeycomb-strukturen ger jämn tryckavlastning. StimuLITE-dynan avlastar tryck från känsliga områden och gör att utskjutande sittben "känner" samma tryck som den omgivande sittytan. StimuLITE Barndyna anpassar sig till barnets kroppsform och ger jämn viktfordelning på en större yta än vad andra tryckavlastande dynor gör.

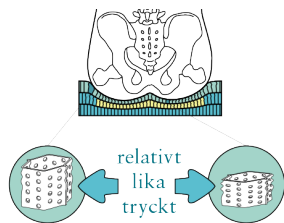

relativt lika tryck
liten belastning hög belastning
Fördelar tryck efter kroppsform

Reducerar skjuvkraft

Den horisontella fastheten i dynans material bestämmer dess skjuvmotstånd och stabilitet. För mycket fasthet ökar skjuvkrafterna medan för liten fasthet försvagar stabiliteten. StimuLITE-dynan med dess två lager minimerar skjuvning utan att minska stabiliteten. Det anpassliga övre lagret har låg horisontell fasthet för att åstadkomma reducerade skjuvkrafter mot huden. Det nedre lagret har högre horisontell fasthet för förstärkt stabilitet. Det elastiska överdraget arbetar tillsammans med honeycomb för att sprida sidokrafterna mot huden.

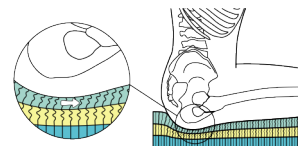

minimal skjuvkraft mot vävnader
Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE Sittdyna för barn

StimuLITE Pediatric Contoured har konstruerats med hänsyn till både barn och föräldrar, och kan tvättas och torkas i maskin. Denna lätta, underhållsfria dynan håller barnen svala, torra och bekväma hela dagen. Den perforerade honeycomb-strukturen och det luftiga överdraget fungerar som ett inbyggt ventilationssystem. Det låter luft cirkulera och avleder fukt, för att förhindra hudskörhet.

StimuLITE Honeycomb sittdynor motverkar flera olika orsaker till trycksår genom sin konstruktion.

Låg vikt - 0,5 - 1 kg
Tjocklek ca 7 cm
Max brukarvikt 50 kg

Överdrag med luftgenomsläpp och nät på framsidan för full ventilation samt möjlighet att förkorta dynan.



StimuLITE Konturerad Barndyna

Storlek (sittbredd x sittdjup) x 7 cm
finns ej med rundad botten

Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
PDCD1010	26x26cm	PDCD1314	33x36cm
PDCD1012	26x31cm	PDCD1414	36x36cm
PDCD1212	31x31cm	PDCD1416	36x41cm
PDCD1213	31x33cm	PDCD1616	41x41cm
PDCD1214	31x36cm		

Andra storlekar kan fås på beställning.

Max storlekar:
PDCD1416 plan botten (36x41cm)


Överdrag:
Cordura: COVPDCD + storlek
Ullfrotté: WCOVPDCD + storlek
Glidöverdrag: COVOUTPDCD + storlek

StimuLITE Inkontinensinlägg

Storlek (sittbredd x sittdjup)

Art. Nr.	Storlek
IN1010	26 x 26 cm
IN1212	31 x 31 cm
IN1414	36 x 36 cm
IN1515	38 x 38 cm
IN1616	41 x 41 cm

Passar alla dynor, placeras under dynan i överdraget, vita sidan upp!

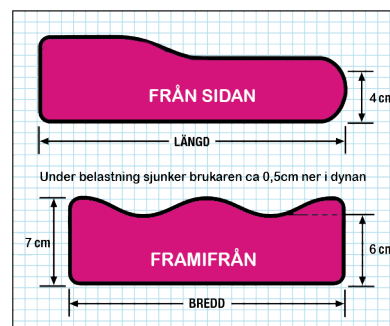

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Samtliga StimuLITE sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17
442 40 Kungälv
Tel: 031-52 18 95
Fax: 031-52 18 92
email: goran@rehabshop.com
www.rehabshop.se