



StimuLITE®

SPORT SITTDYNA

Luftgenomsläppligt överdrag för bästa möjliga ventilation

Kan tvättas i maskin och torktumlas




Perforerad bikakestruktur för bästa luftcirkulation, för att förhindra ansamling av fukt

Låg vikt: mindre än 1,5 kg

Glatt överdrag för bästa möjliga rörlighet vid sportaktivitet


Inkontinensinlägg (Tillbehör)

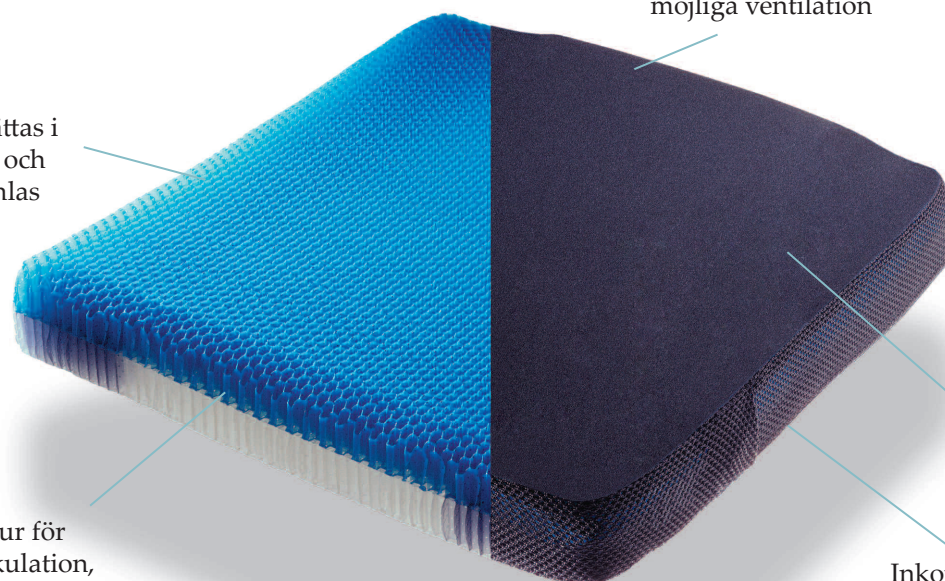

SUPERLÄTT MED ENANSTÅENDE KOMFORT

StimuLITE® Sport sittdyna är utvecklad speciellt för rullstolssport och motsvarar det gällande föreskrifterna. StimuLITE Sportdyna lämpar sig även för andra användningsområden, för personer med mindre decubitusrisk. StimuLITE Sport sittdyna med bikakestruktur är mycket lätt, med optimal tryckutjämning och komfort.

Två olika fasta skikt av bikakestrukturen låter sittbenknölna sjunka in i dynan. Resultatet blir en anpassning av dynan till kroppen, vilket leder till en jämn tryckfördelning och stabilitet. Som förstärkning är dynan fastare i sidorna. Dynans vikt ligger under 1,5 kg, eftersom det använda materialet, 100% Termoplastisk Polyuretan, är mycket lätt. Materialet är antibakteriellt och minskar uppkomsten av lukt vid regelbunden rengöring. Dynan och

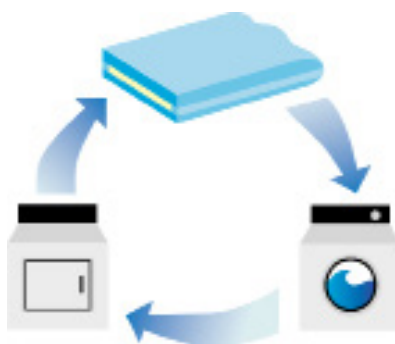

överdraget är maskintvättbara och kan torktumlas. För inkontinensproblem finns ett inkontinensinlägg som placeras under dynan. Både överdraget och dynbasen tål kontakt med urin. Den främsta orsaken till att trycksårsproblem uppstår är tryck, sjukkraft och fukt vilket gör huden skör. StimuLITE Sportdyna minskar tryckbelastning, reducerar uppkommande skjuvkrafter och friktion samt avleder fuktansamling vilket förhindrar uppmjukning av huden. Den perforerade bikakeformen främjar luftcirkulationen som avleder fukt. Ett luftgenomsläppligt överdrag med öppningar runt om på sidorna kompletterar effektivt detta ventilationssystem.




Total Pressure Management™

Förebygger Hudskörhet

Fukt "mjukar upp" huden och gör den skör. Fukt uppstår genom svett och/eller kroppsvätska. Genom ett unikt ventilationsystem som StimuLITE Sport sittdyna erbjuder med dess perforerade celler i bikakestruktur (honeycomb) och med ett luft-genomsläppligt överdrag kan luft cirkulera och fuktighet avdunsta. Detta gör att användaren kan hålla sig torr och sval. Dynan och överdraget kan maskintvättas och torktumlas vilket underlättar god hudhygien.



Andas och avdunstar fukt.

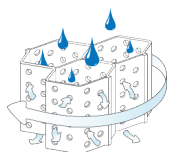


Komplett ventilationsystem

Tryckutjämning

StimuLITE Sport sittdynans cellkonstruktion former sig efter kroppen och fördelar trycket över en maximal yta, vilket också ger en mycket god komfort.

StimuLITE Sport sittdyna har en låg höjd på cellerna vilket betyder att personer utan känsel eller i hög risk att få trycksår ska överväga att använda StimuLITE Contoured eller StimuLITE Classic sittdyna.

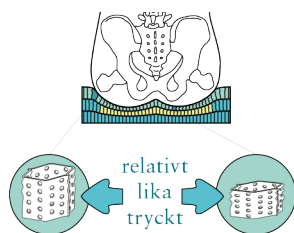


liten belastning

hög belastning

Fördelar tryck efter kroppsform

Reducerar skjuvkraft

Dynans laterala styvhet avgör hur mycket sjuvning och stabilitet dynan får. För mycket styvhet ökar skjuvkraften. Två skikt i olika styvhet i StimuLITE Sport- dynan minimerar skjuvningen utan att göra avkall på stabiliteten. Det övre skiktet har en mindre lateral styvhet för att minska skjuvkraften mot huden. Den nedre skikten har större horisontalstyvhet för optimal stabilitet. Dynans stretchbara överdrag fungerar tillsammans med dynans överkikt till en mild skjuvkraft mot huden.

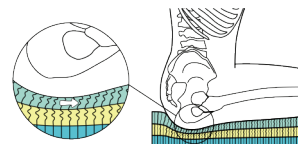

minimal skjuvkraft mot vävnader

Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE® Sport Sittdyna


StimuLITE Sport Sittdyna har låg vikt, är nästan skötselfri, och erbjuder mycket bra tryckutjämning. Dynan är lätt att hålla ren och kan tvättas i maskin samt torktumlas, vilket underlättar för inkontinenta personer. Den tvåskiktiga cellkonstruktionen erbjuder individuell anpassning och form, fördelar tryck samt ger stabilitet. Dynans perforerade cellkonstruktion tillåter luft att cirkulera och fukt att avdunsta så att sittytan förblir torr. Användaren håller sig torr och sval, även under pågående sportaktiviteter. Det unika ventilationsystemet reducerar risken för hudskörhet och erbjuder optimal kontroll över sittryck. Som extra tillbehör finns en liten väska som kan fästas med kardborre på dynans undersida, för nycklar, plånbok.

Dynans unika överdrag är glatt och tillåter full rörlighet vid sportaktiviteter.

StimuLITE Sport Sittdynor			
Storlek (sittbredd x sittdjup) x 5cm			
Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
SP1414	36x36cm	SP1620	41x51cm
SP1416	36x41cm	SP1716	43x41cm
SP1418	36x46cm	SP1717	43x43cm
SP1420	36x51cm	SP1718	43x46cm
SP1516	38x41cm	SP1720	43x51cm
SP1517	38x43cm	SP1816	46x41cm
SP1518	38x46cm	SP1817	46x43cm
SP1520	38x51cm	SP1818	46x46cm
SP1616	41x41cm	SP1820	46x51cm
SP1617	41x43cm	SP2016	51x41cm
SP1618	41x46cm	SP2018	51x46cm
Max storlek: SP2020 plan botten (51x51cm)			
Överdrag: Cordura: COVSP + storlekskod tex COVSP1618 Anti-glid: COVSMRT + storlekskod Vattentätt: WPC + storlekskod Ullfrotté: WCOVSP + storlekskod			
Tillbehör: Inkontinenslägg (IN + storlek), ficka till överdrag (DPOCKET), positioneringskil (KIL)			

StimuLITE Inkontinenslägg	
Storlek (sittbredd x sittdjup)	
Art. Nr.	Storlek
IN 1010	26 x 26 cm
IN 1212	31 x 31 cm
IN 1414	36 x 36 cm
IN 1616	41 x 41 cm
IN 1618	41 x 46 cm
IN 1816	46 x 41 cm
IN 1818	46 x 46 cm
IN 2020	51 x 51 cm

Andra bredder kan fås på beställning

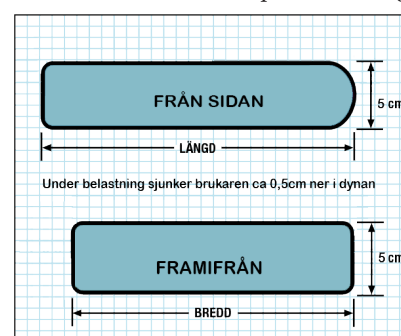

Max brukarvikt 130 kg.



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Samtliga StimuLITE sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 och SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
Fax: 031-52 18 92
goran@rehabshop.com
www.rehabshop.se