



TRYCKFRIHET


Stimulite® bikakematerial

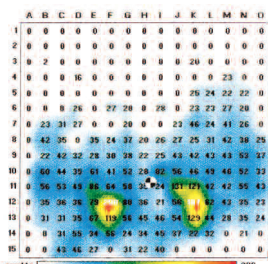

Stimulite® ... Den intelligenta lösningen

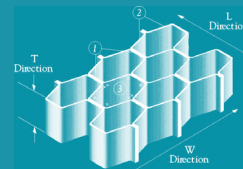

100kg person sittande
på en skum dyna

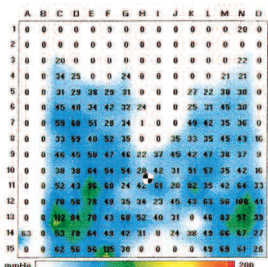

100kg person sittande
på en Stimulite dyna

Elegant och modernt, Supracor's revolutionerande Stimulite® Honeycomb material är på väg att ersätta konventionella stötdämpande material - skum och geléer - i ett brett användningsspektrum, från kontorsmöbler till flygindustrin. Som en mjuk, flexibel bikakestruktur som har "minne", är Stimulite® lätt och fördelar vikten jämnt över dess yta och ger utmärkt stabilitet. Dess cellmatrix består av omväxlande tjocka och tungväggiga, smältbundna celler som böjs när de komprimeras för att minska trycket.

När du sitter på en Stimulite® dyna, så utjämnar den komprimerade cellen trycket utåt för att ge optimalt stöd åt utstående kroppsdelar. Honeycomb-cellerna formar sig efter kroppen och är följ samma vid rörelse, för att mildra stötar och skador på vävnaden.

Stimulite® har en lång meritlista inom det medicinska området bland rullstolsburna och sängliggande patienter där tillförlitlig prestanda är kritisk för att förhindra livshotande trycksår. Sedan 1994 har Stimulite® sittdynor och sjukhusmadrasser gett Total Pressure Management® - tryckavlastning, minskad skjuvning och ventilation genom att avstyra värme och fukt - vilket är nyckeln till effektivt trycksårsförebyggande. Som namnet antyder, ger Stimulite® ytterligare en fördel som är viktigt för långsiktig sittkomfort. Huden stimuleras av den flexibla cellen och dettamstimulerar kapillärkraften i vävnaden för att hålla blodet syresatt. Detta bekämpar domningar som kan uppstå när man sitter för långa stunder.


VAD ÄR STIMULITE® GJORD AV?

Stimulite® Honeycomb är gjord av högklassigt, medicinskt godkänd termoplastisk polyuretan, ett flexibelt och fjädrande material som är naturligt antibakteriell, allergifritt och motverkar svampförekomst. Samma material kan hittas i sårförband och hjärtklaffar. Materialet är maskintvättbart vilket underlättar att hålla huden ren och frisk och håller produkten luktfri efter rengöring.

VAD GÖR STIMULITE® VENTILATION SYSTEMET SÅ UNIKT?

De flesta dynor och stödytor reglerar mikroklimatet genom överdraget. Forskning har dock visat att detta inte effektivt leder värme och fuktighet från kroppen. Varat Stimulite® material fungerar dock på annat sätt: Varje Stimulite® honeycomb cell är perforerad för att tillåta luft att strömma både vertikalt och horisontellt, vilket skapar ett perfekt mikroklimat för långsiktig sitt- eller liggkomfort. För att komplettera ventilationssystemet, är våra överdrag tillverkade av naturliga, andningsaktiva tyger som arbetar med Honeycomb materialet för att transportera bort fukt och minimera svettning.


Total Pressure Management®

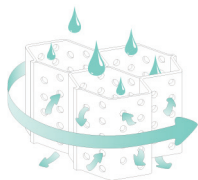

FÖREBYGGER HUDSKÖRHET


Hudskörhet är en uppluckring av hud som följd av kontinuerlig exponering för värme och kroppsvätskor eller fukt. Mjuk eller urlakade hud är mindre tolerant mot tryck och detta kan leda till sår.

Stimulite® Honeycomb materialet är perforerat, så att luft kan cirkulera och fukt avdunsta vilket bidrar till att bibehålla hudens styrka. Avtrycket av bikakecellerna och deras rörlighet stimulerar blodflödet för att förbättra cirkulationen.

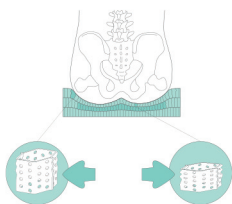

TRYCKAVLASTNING OCH STABILITET


Stimulite® Honeycomb minskar trycket genom att fördela det jämt över sittytan och avlasta utstående kroppsdelar. Detta leder till att sittbensknölar och andra utsatta ställen "känner" samma tryck som den omgivande anatomin. Bikakecellerna anpassar sig efter kroppsform, och fördelar vikten likformigt. Stimulite® Honeycomb ger en stabil sittposition genom cellväggarnas konstruktion som ställer cellväggar vinkelräta mot kroppen för att förhindra glidning och skjuvkraft

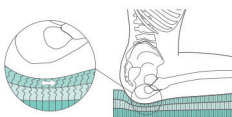


FÖRMINSKAD SKJUVKRAFT

Materialets horisontella styvhet bestämmer både dess skjuvmotstånd och stabilitet. För mycket styvhet ökar skjuvkrafter, medan alltför litet skjuvning minskar stabiliteten. Stimulite®'s bikakestruktur minimerar skjuvning utan att offra stabiliteten. Bikakecellerna ansluter sig axiellt till kroppen, och böjer sig med kroppens rörelse för att minska skjuvkrafter mot huden och cellerna fjädrar tillbaka när trycket på dem minskar.


Avancerade Sittdynor

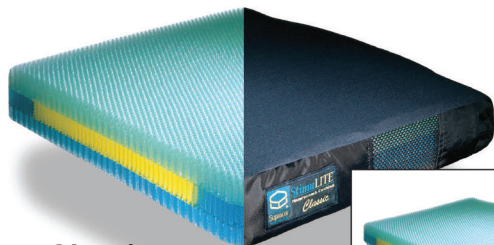

Classic

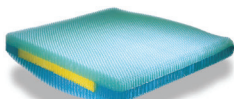

rund botten

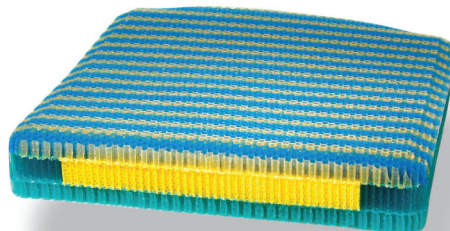

Classic XS

Stimulite® Classic och **Classic XS** sittdyna består av tre lager flexibla sammansvetsade celler. Cellskikten har olika styvhet för att sittbensknöarna - oberoende av varandra - skall kunna sjunka ned i dynan samtidigt som den omkringliggande huden och vävnaden får stöd. Fastare celler används i botten för att ge ökad stabilitet. Dynan ger total tryckavlastning som förebygger och lindrar trycksår upp till grad 3*. Den plana sittytan underlättar vid sidoförflyttningar. Stimulite® Classic XS sittdyna har ett mjukare toppskikt av följsam Honeycomb än Classic för personer med extra känslig hud.

*enligt definition av NPUAP-EPUAP)



Contoured




Contoured XS


Stimulite® Contoured och **Contoured XS** sittdyna är speciellt framtagen för paraplegiker, tetraplegiker och övriga personer som behöver sittdynor med extra krav på positionering, tryckutjämning, och komfort. Dynan har en "sittgrop" som ger optimal bäckenpositionering för att förbättra hållning och stabilitet. Sittgropen består av en mjukare del för svanskota och sittbensknölar. Bendelare och lårkilar är inbyggda för bättre komfort utan att försvåra vid sidoförflyttningar. Sittgropen finns i två olika breddar. Den större sittgropen, +3 cm, beställs genom tillägget **BB (Broader Base)**. Stimulite® Contoured XS sittdyna har ett mjukare toppskikt av följsam Honeycomb än Contoured för personer med extra känslig hud.

Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

Förebyggande Sittdynor

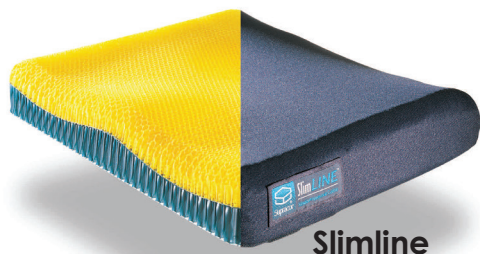


Slimline

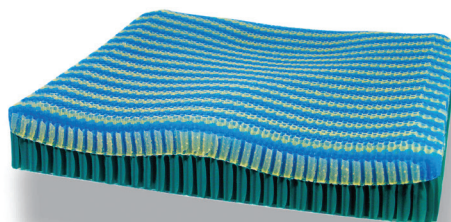

Slimline XS

Stimulite® Slimline och **Slimline XS** sittdyna är behagligt konturerad för att underlätta förflyttningar och därmed perfekt för rörliga och aktiva personer med låg risk för att få trycksår. I likhet med övriga Stimulite® sittdynor erbjuder Slimline serien total tryckbehandling - tryckavlastning, ventilation och minskad skjuvning - avleder värme och fukt och förebygger därigenom de främsta orsakerna till trycksår. **Stimulite® Slimline XS** sittdyna är tillverkad för användare med känslig hud.

För användare med hög risk för trycksår, eller som har haft sådana, rekommenderas Stimulite® Classic eller Contoured serierna.

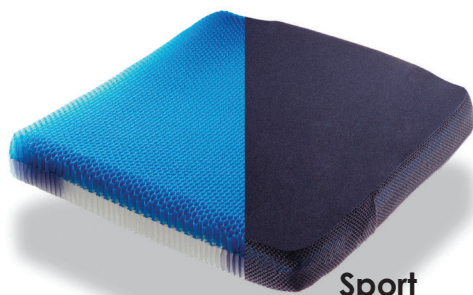

Sport




Smart

Stimulite® Sport sittdyna är utvecklad speciellt för rullstolssport och tillåts enligt de flesta sportreglement. Stimulite® Sportdyna lämpar sig även för andra användningsområden. Till exempel är den lätt att förflytta sig på. Stimulite® Sport sittdyna med bikakestruktur är mycket lätt (2kg), med optimal tryckutjämning och komfort. Dynan har plan botten men på grund av att den är följsam passar den i de flesta stolar.


Stimulite® Smart sittdyna är lämplig för alla typer av rullstolar. Den är lätt att lyfta på grund av låg vikt, och är endast 5 cm hög. Du glider inte på dynan vilket underlättar vid körning av rullstol. Dynans mjuka översikt gör den lämplig även för användare med extra känslig hud. Dynan har plan botten men på grund av att den är följsam passar den i de flesta stolar.

Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

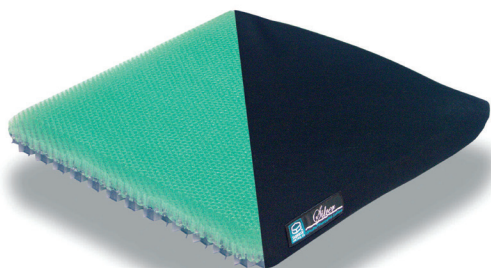

Silver

Stimulite® Silver sittdyna är lämplig för användare som sitter kortare stunder i en rullstol eller sparkar sig fram när de förflyttar sig. Stimulite®Silverdyna lämpar sig även för andra användningsområden, för personer med mindre decubitusrisk. Sittdynan med bikakestruktur är mycket lätt (1,5kg), bara 2,5 cm hög, och bjuder på optimal tryckutjämning och komfort. Dynan har plan botten men på grund av att den är följsam passar den i de flesta stolar.

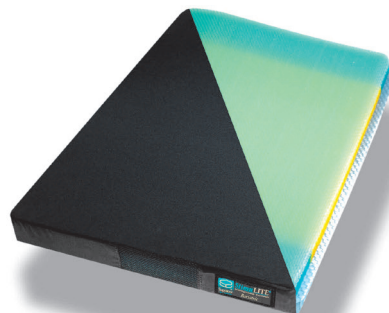


Classic Bariatric
max vikt 360kg

Stimulite® Classic Bariatric sittdyna bjuder på förträfflig komfort och stabilitet för användare i behov av större sitttytor och tryckavlastning. Kan belastas med vikt upp till 360kg. Dynan väger ca 2,9kg inkl. överdrag beroende på storlek. Dynan är 7 cm hög. Dynan har plan botten men passar i de flesta stolar.

Sittdynor för Barn



**Barndyna
Corbee**

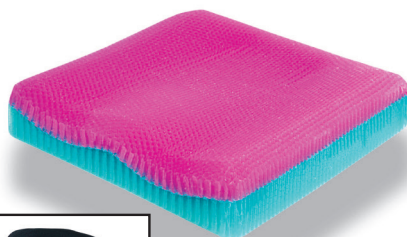

**Barndyna
Contoured**



Stimulite® Barndyna Corbee och **Barndyna Contoured** är konstruerad för komfort som ger maximal tryckavlastning för användare som väger mindre än 50kg. Dynan väger 1/2 - 1kg beroende på storlek. För barn med inkontinens kan ett inkontinenskydd placeras inuti överdraget, under dynan. Vätskan dräneras genom dynan och huden hålls torr. **Barndyna Contoured** erbjuder genom sin konturerade form extra positioneringsmöjligheter vid ökad stabiliseringsbehov.

Beställningsguide Stimulite® Sittdynor

Alla Stimulite® sittdynor har en artikelnummer enligt följande mönster:
Modellkod + storlekskod (+S för modeller med rund botten), tex SM1416 eller CDXS1517S

Vuxendynor: (max vikt 130kg, CLBA max vikt 360kg)

Modellkod	Modellnamn	Höjd	Storlek			
CL	= Classic *	h6 cm	1316 ♀	= b33 d41 cm	1720	= b43 d51 cm
CLXS	= Classic Extra Mjuk (XS) *	h6 cm	1414	= b36 d36 cm	1816	= b46 d41 cm
CD	= Contoured *	h8 cm	1416	= b36 d41 cm	1817	= b46 d43 cm
CDBB	= Contoured Bredare Botten *	h8 cm	1418	= b36 d46 cm	1818	= b46 d46 cm
CDXS	= Contoured Extra Mjuk (XS) *	h8 cm	1420	= b36 d51 cm	1820	= b46 d51 cm
CDBBXS	= Contoured BB XS *	h8 cm	1516	= b38 d41 cm	2016	= b51 d41 cm
SM	= Slimline *	h6 cm	1517	= b38 d43 cm	2018 ♦	= b51 d46 cm
SMXS	= Slimline Extra Mjuk (XS) *	h6 cm	1518	= b38 d46 cm	2020 ♦	= b51 d51 cm
SP	= Sport **	h5 cm	1520	= b38 d51 cm	2218 °	= b56 d46 cm
SMRT	= Smart **	h5 cm	1616	= b41 d41 cm	2220 °	= b56 d51 cm
SI	= Silver **	h2,5 cm	1617	= b41 d43 cm	2222 °	= b56 d56 cm
CLBA	= Classic Bariatric **	h7 cm	1618	= b41 d46 cm	2418 °	= b61 d46 cm
* = finns med plan eller rund botten			1620	= b41 d51 cm	2420 °	= b61 d51 cm
** = finns bara med plan botten			1716	= b43 d41 cm	2422 °	= b61 d56 cm
♦ = storlek finns i alla 130kg modeller och CLBA			1717	= b43 d43 cm	2424 °	= b61 d61 cm
° = storlek finns som lagervara bara i CLBA			1718	= b43 d46 cm	2620 °	= b65 d51 cm
Andra storlekar kan fås på beställning			♂ = storlek finns som lagervara bara i SMRT			

Barndynor: (max vikt 50kg)

Modellkod	Modellnamn	Höjd	Storlek			
PD	= Barndyna Corbee*	5 cm	1010	= b26 d26 cm	1414	= b36 d36 cm
PDCD	= Barndyna Contoured **	7 cm	1212	= b31 d31 cm	1416	= b36 d41 cm
*= finns med plan eller rund botten			1214	= b31 d36 cm	1616	= b41 d41 cm
** = finns bara med plan botten						











Inkontinensinlägg:

Modellkod	Storlek	
IN	= Inkontinensinlägg	1010 = b26 d26 cm 1816 = b46 d41 cm
Passar alla dynor, placeras under dynan in i överdraget! Vit sida upp. Vätska dräneras genom dynan och tas upp i skyddet. Kan tvättas upp till 95° i tvättmaskin, torktummlas.	1212	= b31 d31 cm 1818 = b46 d46 cm
	1414	= b36 d36 cm 2020 = b51 d51 cm
	1616	= b41 d41 cm 2222 = b56 d56 cm
	1618	= b41 d46 cm 2424 = b61 d61 cm




Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

Stimulite® Tillbehör

STIMULITE TRYCKAVLASTANDE MATTOR / SBS SERIE

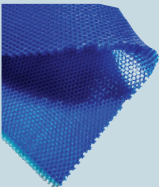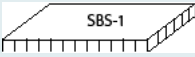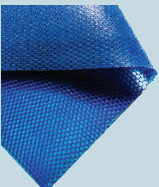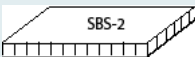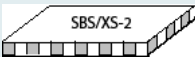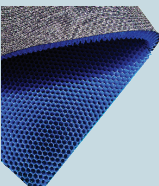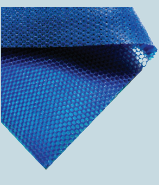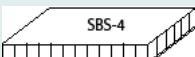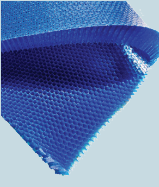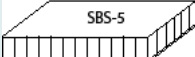	Art Nr	Storlek	Höjd	Fästyta	Produktbeskrivning
	SBS-1	60x60cm	 1,25 cm tjock	Helt öppna celler, ingen fästyta	Ett lager celler, ingen fästyta. Används för sitttytor, duschstol, toastol. Ger stabilitet genom ökad friktion
	SBS-1 90/60	60x90cm			
	SBS-1/48	60x120cm			
	SBS-2	60x60cm	 1,25 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	Ett lager celler, en fästyta, lätt att forma över alla ytor med öppna celler uppåt. SBS-2, 4, och 5 har samma funktion, tjockare mattor ger mer tryckavlastning
	SBS-2 90/60	60x90cm			
	SBS-2/48	60x120cm			
	SBS-2/XS	60x60cm	 1,25 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	Ett lager extra mjuka celler för känslig hud. Samma funktion och tryckavlastning som SBS-2 mattan. Lägg gärna på mjuk underlag
	SBS-3	60x60cm	 1,25 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig tyg på andra sidan	Ett lager celler. Tyg på en sida eliminerar behovet av klädsel på arm och huvudstöd
	SBS-3 90/60	60x90cm			
	SBS-3/48	60x120cm			
	SBS-4	60x60cm	 1,7 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	Ett lager celler, en fästyta, lätt att forma över alla ytor med öppna celler uppåt. SBS-2, 4, och 5 har samma funktion, tjockare mattor ger mer tryckavlastning
	SBS-4 90/60	60x90cm			
	SBS-4/48	60x120cm			
	SBS-5	60x60cm	 2,5 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	Ett lager celler, en fästyta, lätt att forma över alla ytor med öppna celler uppåt. SBS-2, 4, och 5 har samma funktion, tjockare mattor ger mer tryckavlastning
	SBS-5 90/60	60x90cm			
	SBS-5/48	60x120cm			

Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

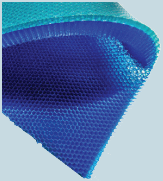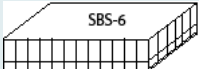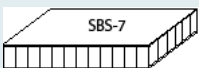	Art. nr	Storlek	Höjd	Fästyta	Produktbeskrivning
	SBS-5/XS	60x60cm	 2,5 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	Ett lager extra mjuka celler för känslig hud. Samma funktion och tryckavlastning som SBS-5 mattan, lägg gärna på mjuk underlag
	SBS-6	60x60cm	 2,5 cm tjock	Öppna celler ena sidan, luftgenomsläpplig plastfilm på andra sidan	Två lager celler, ger bra tryckfördelning. Används för ryggstöd eller positionering, samt sitttytor vid tyngre eller tryckkänsliga brukare
	SBS-7	60x60cm	 2,0 cm tjock	Inga öppna celler. Luftgenomsläpplig plastfilm på båda sidor	Ett lager celler, upplevs som den stummaste matta. Används för positioneringsinlägg för snett bäcken, scoliosuttag, förhöjningar m.m.



Stimulite® HEELBOOT är lätt och bekväm att bära och skyddar foten vid långtidsliggande. Produkten är avsedd för personer med ökad risk för att utveckla trycksår runt hälen och fotleden samt vid ökad smärtproblematik i detta området. Det unika häl och fotavlastningsmaterialet med Stimulite® bikupestruktur är bara 3 cm tjock och tryckavlastar på ett mycket effektivt sätt regionen runt malleolerna samt tålederna, hälbenet och kring hallux valgus området. Heelbooten kan användas dygnet runt och det går bra att ta några steg vid behov. Den är lätt att hålla ren. Maskintvättas i 40 ° eller 60 ° i 30 min. Torktummlas i lågt värme. Kan desinficeras i Virkon. Produkten kommer färdig att användas. Det finns inga lösa delar eller inställningar. Vikt: 0,2-0,5 kg.



StimuLITE Heelboot Storlekar			
	Small	Medium	Large
Artikelnummer	HEEL-S	HEEL-M	HEEL-L
Höjd	27 cm	33 cm	36 cm
Passar skostorlek	35-41	35-45	40-48
Omkrets B (framfot)	20-32 cm	25 - 38 cm	30 - 38 cm
Omkrets A (vad)	> 40 cm	40 - 45 cm	45 - 50 cm




Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

Stimulite® FÅRSKINNS ÖVERDRAG: 100% naturlig fårskinnssovanskt. Töjbar i längsriktning, naturligt andningsaktiv och lukt resistent. Maskintvättbar i 30°.

GLID ÖVERDRAG: Tillverkat i ett slitstarkt, svart power-mesh tyg, med sido ventiler och en halkfri botten för att möta kraven från sport, camping och daglig användning. Maskintvätt 60°.

VATTENTÄTT ÖVERDRAG: vattentät stretch nylon som kommer att hålla din dyna torr i regnet, vid poolen eller i duschen. Hätta som träs över dynan. Maskintvättbar, tål att torktummlas

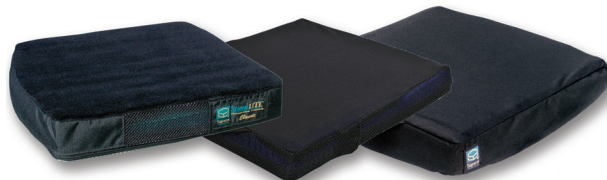

Stimulite® ON TOPP dynfodral

Har du en konventionell dyna, tex koxitdyna, som fungerar bra, men är varm och hård? Med Stimulite® ON TOPP kommer din dyna att andas för att leda värme och fukt från kroppen. Denna avtagbara överdrag har en 2 cm tjockt skikt av Stimulite® Honeycomb som passar på det flesta dynor. Maskintvättbar.



Stimulite® ON TOPP

SOT1414	= 36x36 cm
SOT1616	= 41x41 cm
SOT1618	= 41x46 cm
SOT1818	= 46x46 cm
SOT2020	= 51x51 cm

Med bibehållen CE-Märkning får Du förändra dynan på följande sätt:

Dynan är tillverkad i 100% termoplastisk polyuretan. Den skärs med en vass kniv eller bandsåg. Men kan också med fördel skäras med en kniv där man värmer upp bladet. Dynan "repar" ej upp sig utan bibehåller sin form efter att den är skuren

SITTBREDD: Man får skära i längsriktning 2,5 cm per sida i dynan. Dvs 5 cm totalt.

BAKKANT: Man får skära ut för rullstolsrör. Tag då av hörnet på dynan lika stort som röret har i diameter. **Du får ej korta hela sittdynan i bakkant!**

FRAMKANT: Du får skära av dynan i djupled och Du kan skära olika långt för varje ben. Gör då ett vertikalt 90° snitt mot skärytan. Max 5 cm totalt i djupled.

DYNANS HÖJD: Det är ej tillåtet att förändra eller skära uppe på sittytan tillåtet att skära i kanterna, se ovan.



Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

För varje Stimulite® sittdynmodell och storlek finns det extra överdrag att beställa.

Alla överdrag till Stimulite® sittdynor har en artikelnummer enligt följande mönster:

Överdragskod + Modellkod + storlekskod (+S om dynan har rund botten)

till exempel: COVCL1516, COVOUTCD2020 eller WCOVSM1718S

OBS! Se till att modell och storlekscoden för överdraget motsvarar dynan den ska användas till.

Överdragskod		Modellkod		Passar till
COV	= Corduraöverdrag	CD	= Contoured *	CD, CDXS, CDBB, CDBBXS
WCOV	= Ullöverdrag	CL	= Classic *	CL, CLXS
COVOUT	= Glidöverdrag	SM	= Slimline *	SM, SMXS
Vid nyinköp levereras varje Stimulite® sittdyna med 1 st Corduraöverdrag passande till modell och storlek.		SI	= Silver **	SI
		SMRT	= Smart **	SMRT, SP
		SP	= Sport **	SP, SMRT
		CLBA	= Classic Bariatric **	CLBA
		PD	= Barndyna Corbee *	PD
		PDCD	= Barndyna Contoured **	PDCD
		* = finns med plan eller rund botten		
		** = finns bara med plan botten		

Vattentätt hätta: WPC + Storlekscod, passar till alla modeller

Storlekscod

1010 ●	= b26 d26 cm	1517 ▼	= b38 d43 cm	1718 ▼	= b43 d46 cm	2218 °	= b56 d46 cm
1212 ●	= b31 d31 cm	1518 ▼	= b38 d46 cm	1720 ▼	= b43 d51 cm	2220 ▽	= b56 d51 cm
1214 ●	= b31 d36 cm	1520 ▼	= b38 d451cm	1816 ▼	= b43 d41 cm	2222 ▷	= b56 d56 cm
1316 ↔	= b33 d41 cm	1616 ♠	= b38 d41 cm	1817 ▼	= b43 d43 cm	2224 ▷	= b56 d61 cm
1414 ♠	= b36 d36 cm	1617 ▼	= b41 d43 cm	1818 ▼	= b46 d46 cm	2418 ▷	= b61 d46 cm
1416 ♠	= b36 d41 cm	1618 ▼	= b41 d46 cm	1820 ▼	= b46 d51 cm	2420 ▷	= b61 d51 cm
1418 ▼	= b36 d46 cm	1620 ▼	= b41 d51 cm	2016 ♦	= b51 d41 cm	2422 ▷	= b61 d56 cm
1420 ▼	= b36 d51 cm	1716 ▼	= b43 d41 cm	2018 ♦	= b51 d46 cm	2424 °	= b61 d61 cm
1516 ▼	= b38 d41 cm	1717 ▼	= b43 d43 cm	2020 ♦	= b51 d51 cm	2620 °	= b65 d51 cm

● = storleken finns bara i PD, PDCD

↔ = storleken finns bara i SMRT

♠ = storleken finns i PD, PDCD, CD, CL, SM, SI, SMRT, SP

▼ = storleken finns i CD, CL, SM, SI, SMRT, SP

▷ = storleken finns i CL,CLBA ▽ = storleken finns i CD,CL,CLBA

♦ = storleken finns i CD, CL, SM, SI, SMRT, SP, och CLBA

▽ = storleken finns i CD,CL,CLBA

° = storleken finns bara i CLBA

Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

Stimulite® ställbar RYGGSTÖD

med Honeycomb material låter luften cirkulera och fukt avdunsta samtidigt som den utjämnar trycket för exceptionell komfort och stabilitet. Justerbart med kardborrband. Detta är en komplett rygg då du tar bort rullstolens befintliga rygg och ersätter med denna produkt. Kan kombineras med lumbar stöd för extra stabilitet. Finns för fast eller kryssram rullstolar från 36 till 61 cm bred. Maskintvättbar.



STIMULITE STÄLLBAR RYGGSTÖD

För ihopfällbara rullstolar			För rullstolar med fast ram		
Art.nr	Bredd	Höjd	Art nr.	Bredd	Höjd
BACK1416	36 cm	41 cm	BACKR1412	36 cm	31 cm
BACK1616	41 cm	41 cm	BACKR1612	41 cm	31 cm
BACK1816	46 cm	41 cm	BACKR1812	46 cm	31 cm
BACK2016	51 cm	41 cm	BACKR2012	51 cm	31 cm
BACK2216	56 cm	41 cm	BACKR2212	56 cm	31 cm
BACK2416	61 cm	41 cm	BACKR2412	61 cm	31 cm



Stimulite® SVANKSTÖD

Oavsett om du sitter i en stol eller bil, denna eleganta och andningsaktiva Stimulite® svankstöd kommer att förbättra din hållning och lindra tryck, samtidigt att den håller dig sval och torr. Svankstödet har för fastsättning en avtagbar, justerbar rem. Tvättbar.

Art.nr: LSUPP, 1 storlek passar alla dynor



Stimulite® justerbara positionerings KILAR

Täckt i Cordura tyg med kardborre för enkel fastsättning under dynan. Finns i två höjder - 2,5 och 5 cm samt två längder - 36 eller 40 cm



KILAR Storlekar

KIL3S	= 2,5x36x25 cm
KIL3L	= 5x36x25 cm
KIL5S	= 2,5x40x25 cm
KIL5L	= 5x40x25 cm

Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

Stimulite® Madrasser



Stimulite 3-ZON MADRASS är en statisk madrass med trycksårspåbyggande och tryckavlastande egenskaper. Madrassen består av en överdel och, valvis, en underdel, och är lämplig för vård av brukare med trycksår upp till sårgrad 3 eller med behov av smärtlindring. Madrassen är avsedd för bruk på sjukhus eller i hemmiljö. Madrassens överdel kan också användas som bäddmadrass ovan på en vanlig madrass. Med sin konstruktion är Stimulite madrassen stabil att sitta på i kanten, vilket gör den särskilt

lämplig för brukare som vill flytta mellan säng och rullstol. Stimulite madrassen är ljudlös, skötselfri, och har lågt vikt.

Madrassens överdel är konstruerad av sexkantceller i bikakestruktur (Honeycomb) och består till 100% av medicinsk godkänd termoplastisk polyuretan (TPU), vilket tål kontakt med fukt eller kroppsvätskor, inklusive urin. Väljer man till en underdel, finns den i TPU Honeycomb, eller skumfjädrar av polyeter skum. Stimulite madrasser, liksom alla andra Stimulite produkter, erbjuder "Total Pressure Management": Tryckavlastning, minskad skjuvning samt ventilation. Brukarvikt för vuxenmadrasser är 25-180 kg, och för barnmadrasser mellan 0-50 kg. Stimulite madrasser erbjuds i tre bredder: 82,5 cm, 85 cm, och 90 cm. Längden är 200 cm. Vid behov levereras Stimulite madrasser med ett ångpermeabelt men vattentätt hygienöverdrag. Vill man till fullt utnyttja madrassens ventilerande effekt användes ett vanligt lakan. Skumbasen ska då inkläs i hygienöverdraget.

Stimulite madrasser finns i tre utformningar:

Som övermadrass / bäddmadrass:

- Vid behov av maximalt tryckavlastning och ventilation.
- En lättanvänd madrass som passar på de flesta sängar / madrasser / sängramar.
- Lätt att flytta med till för exempel sommarboende
- Följsam vid användandet av en reglerbar fot- och huvudända då de inte bildas några veck i vinklarna
- 3-zon koncept med mjukare huvud- och fotdel
- Vikt: 7kg, Brukarvikt: 25-180kg



Som helmadrass:

- Vid behov av maximalt tryckavlastning och ventilation.
- Ger trycksårshandling upp till grad 3. Har man behov av det kan man dela på produkten och använda överdelen som en toppmadrass vid ex resa.
- Madrassen levereras i två modeller
- **BiLite Complete Comfort** med extra mjuk skumbas för ökat komfort
- **BiLite Complete Support** med fastare TPU bas för ökat stöd under för flyttning och lägesändringar
- Vikt: 12-19kg, Brukarvikt: 25-180kg



Som barnmadrass:

- Vid behov av tryckavlastning och ventilation för barn upp till 50 kg.
- Används som hel- eller övermadrass
- Vikt: 2kg, Brukarvikt: 0-50kg



Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

STIMULITE 3-ZON MADRASS-KITS

Typ	Art nr	Bredd	Längd	Höjd	Botten	Består av:
Helmadrass Extra Mjuk	3ZON82B	82,5 cm	200 cm	19 cm	Skumfjäder	GSR00056, FOUNDATION33, COVIN3380BH, BAG
Helmadrass Extra Mjuk	3ZON85B	85 cm	200 cm	19 cm	Skumfjäder	GSR00067, FOUNDATION34, COVIN3480BH, BAG
Helmadrass Extra Mjuk	3ZON90B	90 cm	200 cm	19 cm	Skumfjäder	SRC00024, FOUNDATION36, COVIN3680BH, BAG
Helmadrass fast	3ZON82BF	82,5 cm	200 cm	12 cm	Honeycomb	GSR00056, FOUNDATION33F, COVIN3380B, BAG
Helmadrass fast	3ZON85BF	85 cm	200 cm	12 cm	Honeycomb	GSR00067, FOUNDATION34F, COVIN3480B, BAG
Helmadrass fast	3ZON90BF	90 cm	200 cm	12 cm	Honeycomb	SRC00024, FOUNDATION36F, COVIN3680B, BAG
Bäddmadrass	3ZON82	82,5 cm	200 cm	7 cm		GSR00056, COVIN3380, BAG
Bäddmadrass	3ZON85	85 cm	200 cm	7 cm		GSR00067, COVIN3480, BAG
Bäddmadrass	3ZON90	90 cm	200 cm	7 cm		SRC00024, COVIN3680, BAG

RESERVDELAR TILL STIMULITE 3/ZON MADRASS KITS

Beskrivning	Art nr.	Max tvätt	Desinfektion	Bredd	Längd	Höjd	passar till
Övermadrass / Bäddmadrass	GSR00056	60 ° 30 min	Virkon	82,5 cm	200 cm	7 cm	alla madrass kits
	GSR00067	60 ° 30 min	Virkon	85 cm	200 cm	7 cm	alla madrass kits
	SRC00024	60 ° 30 min	Virkon	90 cm	200 cm	7 cm	alla madrass kits
Madrassbas, extra mjuk (Skumfjäder)	FOUNDATION33	N/A	N/A	82,5 cm	200 cm	12 cm	3ZON82B
	FOUNDATION34	N/A	N/A	85 cm	200 cm	12 cm	3ZON85B
	FOUNDATION36	N/A	N/A	90 cm	200 cm	12 cm	3ZON90B
Madrassbas, fast (Honeycomb)	FOUNDATION33F	60 ° 30 min	Virkon	82,5 cm	200 cm	5 cm	3ZON82BF
	FOUNDATION34F	60 ° 30 min	Virkon	85 cm	200 cm	5 cm	3ZON85BF
	FOUNDATION36F	60 ° 30 min	Virkon	90 cm	200 cm	5 cm	3ZON90BF
Hygienöverdrag	COVIN3380B	95 °	Alkohol / Virkon	82,5 cm	200 cm	12 cm	3ZON82BF, FOUNDATION33
	COVIN3480B	95 °		85 cm	200 cm	12 cm	3ZON85BF, FOUNDATION34
	COVIN3680B	95 °		90 cm	200 cm	12 cm	3ZON90BF, FOUNDATION36
	COVIN3380BH	95 °		82,5 cm	200 cm	19 cm	3ZON82B
	COVIN3480BH	95 °		85 cm	200 cm	19 cm	3ZON85B
	COVIN3680BH	95 °		90 cm	200 cm	19 cm	3ZON90B
	COVIN3380	95 °		82,5 cm	200 cm	7 cm	3ZON82, FOUNDATION33F
	COVIN3480	95 °		85 cm	200 cm	7 cm	3ZON85, FOUNDATION34F
	COVIN3680	95 °		90 cm	200 cm	7 cm	3ZON90, FOUNDATION36F
Komfortöverdrag	COVST4080	60 °	N/A				alla madrasser
Fuktuppsamlare	INMATT3227	95 °	N/A	80 cm	200 cm		alla madrasser
Väska	BAG	60 °	/N/A				alla madrasser

Stimulite® Bassinet & Crib Matress - Barnmadrassen som andas

Helt ventilerad barnmadrass som tillåter barn att andas genom Honeycomb materialet och vätska att rinna igenom. Materialet är antibakteriellt samt kvalster och svampfritt. För att reducera risken med plötsligt spädbarnsdöd ska barnet ligga i ett naturligt mikroklimat så att den inte blir för varm och minskas risken för att andas in sin egen CO2. Stimulite® ventilerade struktur gör att luft och vätska kan rinna genom madrassen och barnet ligger torrt och svalt på madrassen. Madrassen har ett överdrag i ekologisk bomull. Man kan använda den med eller utan överdrag. Vill man bäddamed vanliga lakan går det också bra. Tvätta madrasskärnan separat i maskin 60°, 30 minuter i tvättmaskin utan blekmedel.

STIMULITE Barnmadrasser

Art.nr	Bredd	Längd	Tjocklek	Hygienöverdrag	Komfortöverdrag	Vikt	Brukarvikt
BASSINET	39 cm	80 cm	5 cm	COVINBASSINET	COVSTBASSINET	ca 2kg	0-50kg
CRIBMATT2448	60 cm	120 cm	5 cm	COVINCRIB2448	COVSTCRIB2448	ca 2kg	0-50kg
CRIBMATT2456	60 cm	140 cm	5 cm	COVINCRIB2456	COVSTCRIB2456	ca 2kg	0-50kg
CRIBMATT2752	68 cm	130 cm	5 cm	COVINCRIB2752	COVSTCRIB2752	ca 2kg	0-50kg
CRIBMATT2856	70 cm	140 cm	5 cm	COVINCRIB2856	COVSTCRIB2856	ca 2kg	0-50kg
CRIBMATT2863	70 cm	160 cm	5 cm	COVINCRIB2863	COVSTCRIB2863	ca 2kg	0-50kg



Stimulite® kudde till sängen

Vår ventilerad Wellness kudde har ett lyxigt mjukt tryckavlastande Stimulite® Honeycomb material så att du kan andas fritt samtidigt hålla dig sval och torr. Formar sig behagligt efter huvud och nacke. Har förstärkning på ena sidan för stabilitet. Maskintvättbar 60°



Stimulite® HÄLSO KUDDE

Vår nya Hälso kudde är ett perfekt komplement till Stimulite® Yoga matta. Andningsaktiv, den har två olika sidor. Används som ett huvud eller ryggstöd, samt rese kudde! Tvättbar



Stimulite® YOGA MATTA

Massera din kropp samtidigt som du stretchar! Med vår Yoga matta, gör du golv övningar och stretching verkligen njutbart på grund av den massagen som bikakeceller ger dig. När du flyttar dig, böjar sig cellerna och stimulerar blodflödet, vilket leder mer syre till vävnader och avslappnande muskler. Perfekt för terapi, meditation och även för att sova. Den lätta Yoga mattan kan rullas till en kompakt storlek och kommer med ett töjbart, andningaktiv överdrag. Detta är också en fantastisk matta för avkoppling vid poolen, de öppna bikakeceller låter vattnet rinna igenom så du håller dig torr och bekväm. Tvättbar.

Kundtjänst / Order: Ring 031-52 18 95 (SE), 48 50 32 97 (NO) eller maila till goran@rehabshop.com

Om Rehabshoppen

Göran Sjödén Rehabshop AB startade sin butiksverksamhet 1995, med inriktning på produkter för hjälpmedel, träning, sjukvård, skor och skoinlägg. Företaget har sedan 1999 en del som inriktar sig på försäljning av sittdynor och madrasser som är trycksårsförebyggande. Här säljer man dessa produkter genom avtal med Sveriges landsting och kommuner. Under hösten 2014 startades ett dotterbolag i Norge med namnet Göran Sjødens Rehabshop Norge A/S. Här säljs sittdynor och madrasser till den norska markanden, bl.a. genom avtal med norska NAV.

Under årsskiftet 2015-2016 delades bolaget enligt följande:

- Göran Sjødens Rehabshop AB moderbolag
- Göran Sjödén Rehab Butik AB Dotterbolag med butiks försäljning
- Göran Sjödén Rehab Distribution AB dotterbolag som ansvarar för försäljning av Stimulite produkter
- Göran Sjödén Rehabshop Norge AS dotterbolag som ansvarar för försäljning av dynor och madrasser i Norge.

Företagen är helägda av Göran Sjödén och Brigitte Sjödén. Både Göran och Brigitte har arbetat med antidecubitus produkter och hjälpmedel sedan början på 80-talet och har god kunskap, och personlig erfarenhet inom området.

Företaget har en gemensam hemsida med information av det totala produktsortimentet, med webbhandel, adress www.rehabshop.se. Mer information om Stimulite produkter finns på www.stimulite.se och www.stimulite.no

Företaget är anslutet till Hjälpmedelstjänsten, NAV samt Marknadsplatsen Företagen är miljöcertifierat samt är medlem i Svensk Handel Göteborg.

GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB

Bultgatan 17, 442 40 KUNGÄLV

Tel: 031-52 18 95

Fax: 031-52 18 92

email: goran@rehabshop.com

www.rehabshop.se

GØRAN SJØDEN REHABSHOP NORGE AS

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: 48 50 32 97

email: goran@rehabshop.com

www.rehabshop.com



Samtliga Stimulite®
produkter är
brandtestade och
godkända enligt

ISO 7176-16, SS;EN 597 och
SS-EN 1021 samt CE-märkta.