




StimuLITE®

SLIMLINE™ EXTRA SENSITIVE SITTDYNA

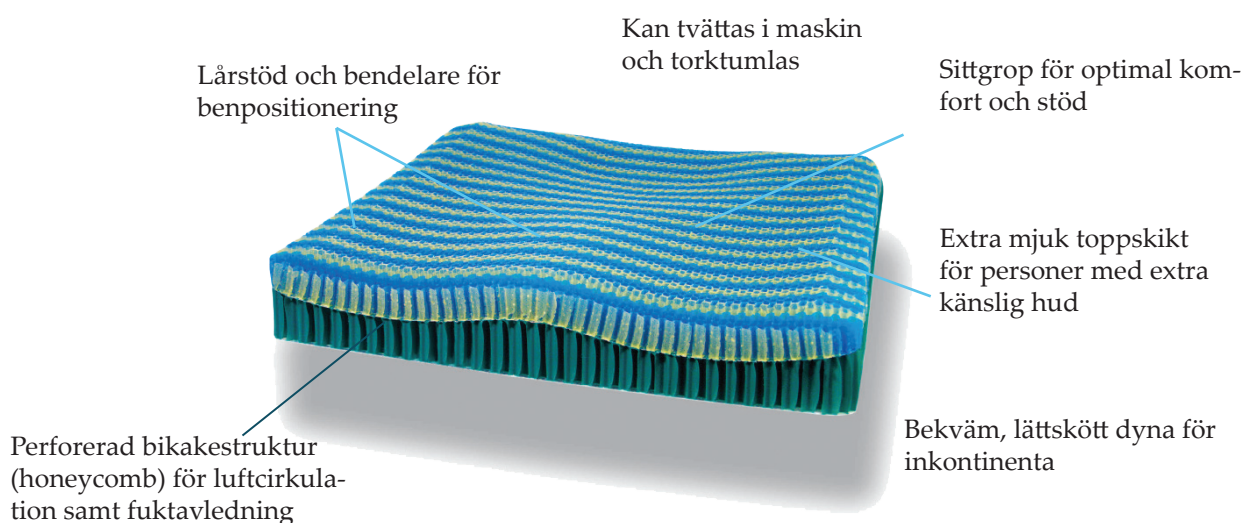

TOTAL PRESSURE MANAGEMENT

KOMFORTABEL, STABIL OCH MASKINTVÄTTBAR

StimuLITE® Slimline™ XS sittdyna är tillverkad för användare med känslig hud och består av ett mjukt överskikt av en konstruktion i bikakestruktur sk. honeycomb. De följsamma bikakecellerna anpassar sig till kroppsformen vilket gör att sittbenknölna sjunker ner i sittdynan som samtidigt ger ökad stabilitet. Cellerna följer kroppsrorelserna för att mildra stötar och förhindra vävnadsskador.

I likhet med övriga StimuLITE sittdynor erbjuder XS-Serien total tryckbehandling, Total Pressure Management™-tryckfördelning, ventilation och minskad skjuvning - avleder värme och fukt och förebygger därigenom de främsta orsakerna till trycksår.

StimuLITEs unika ventilationssystem som består av perforerade bikakeceller ger luftcirkulation och avleder fukt.

StimuLITE Slimline XS sittdyna är behagligt



konturerad för att öka stabilitet, samtidigt som den underlättar förflyttningar och är därmed perfekt för rörliga och aktiva personer.

Dynan är gjord av ett avancerat medicinskt godkänt material, 100% TPU och är naturligt antibakteriell, allergifri och motverkar svampförekomst. Dynan väger endast ca 1 kg och kan tvättas och torkas i maskin. Använd tvättpåse - se tvättinstruktion.

Ett luftgenomsläppligt överdrag hjälper den perforerade bikakecellen av avleda fukt och håller användaren sval, torr och bekväm.

Vid utrangering återvinn plasten, genom plaståtervinningen. StimuLITE Slimline Extra Sensitive rullstolsdyna har 2 års garanti.




Total Pressure Management™

Förebygger Hudskörhet

Fuktighet mjukar upp huden och gör den skör. Fuktighet uppstår av svett och kroppsvätska. Genom ett unikt ventilationssystem som StimuLITE Slimline XS sittdyna erbjuder med dess perforerade celler i bikakestruktur (honeycomb) och med ett luftgenomsläppligt överdrag kan luft cirkulera och fuktighet avdunsta. Detta gör att användaren kan hålla sig torr och sval. Dynan och överdraget kan maskintvättas och torktumlas vilket underlättar god hudhygien.



Andas och avdunstar fukt.

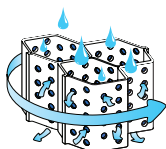


Komplett ventilationssystem

Tryckavlastning

StimuLITEs Slimline XS sittdynas cellkonstruktion formar sig efter kroppen och fördelar trycket över en maximal yta, vilket ger optimal tryckavlastning.


StimuLITE Slimline XS har en låg höjd på cellerna vilket betyder att personer utan känsel eller i hög risk att få trycksår skall överväga att använda StimuLITE Contoured eller StimuLITE Classic sittdyna.

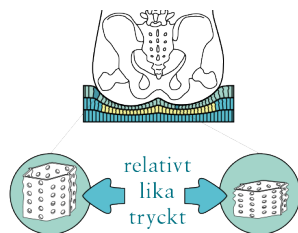

liten belastning hög belastning
Fördelar tryck efter kroppsform

Reducerar skjuvkraft

StimuLITE Slimline XS sittdynas två skikt minimerar skjuvning utan att göra avkall på stabiliteten. För att reducera sjukraften rör sig cellväggarna vid kroppsrörelse. Det följsamma toppskiktet rör isg lateralt med användaren för att reducera sjukraften mot huden, medan det undre skiktet förblir stadigt. Dynans stretchbara överdrag verkar också i lateral riktning och minskar därmed skjuvkraften mot huden.

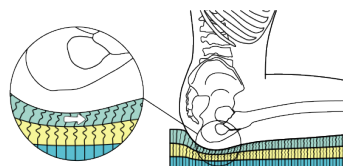

minimal skjuvkraft mot vävnader

Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE Slimline Sittdyna

StimuLITE Slimline sittdyna erbjuder bra komfort för användare i låg risk att få trycksår. Denna lätta dyna har samma unika ventilationssystem som de övriga StimuLITE dynorna. Den avlastar tryck tack vare cellkonstruktionens förmåga att fördela och distribuera vikt genom att forma sig efter kroppen och vara stötupptagande och motverka punkttryck.

Tvättbar i maskin samt går att torktumla. Denna lättskötta dyna håller sig ren och i god kondition under lång tid. StimuLITE Slimline sittdyna väger ca 1 kg och är 6 cm tjock. En rundad botten går att få för rullstolar med hängmattesits, mer än 2,5 cm.

- Exceptionellt bra sittkomfort
- Låg vikt, ca 1 kg, tjocklek 6 cm
- Unikt ventilationssystem
- Tvättbar i maskin, torktumlas
- Erbjuder optimal tryckutjämning
- Finns med rundad botten, för hängmattesits
- Max brukarvikt 130 kg

Tillbehör: StimuLITE Svankstöd

Ett bra stöd kombinerad med bra passform, användbar i rullstol, kontorstol, eller i bilen. köpes separat.

StimuLITE Slimline XS Sittdynor Storlek (sittbredd x sittdjup) x 6cm Rundad botten +S (SMXS1414S)

Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
SMXS1414	36x36cm	SMXS1716	43x41cm
SMXS1416	36x41cm	SMXS1717	43x43cm
SMXS1418	36x46cm	SMXS1718	43x46cm
SMXS1420	36x51cm	SMXS1720	43x51cm
SMXS1516	38x41cm	SMXS1816	46x41cm
SMXS1517	38x43cm	SMXS1817	46x43cm
SMXS1518	38x46cm	SMXS1818	46x46cm
SMXS1520	38x51cm	SMXS1820	46x51cm
SMXS1616	41x41cm	SMXS2016	51x41cm
SMXS1617	41x43cm	SMXS2018	51x46cm
SMXS1618	41x46cm	SMXS2020	51x51cm
SMXS1620	41x51cm		

Andra storlekar kan fås på beställning. En rundad botten rekommenderas för rullstolar med hängmattesits mer än 2,5 cm.

Max storlekar:
SMXS2020, SMXS2020S (51x51cm)


Överdrag:
Cordura: COVSM + storlek
Ulfrött: WCOVSM + storlek
Glidöverdrag: COVOUTSM + storlek

Tillbehör:
Inkontinensinlägg (IN + storlek), ficka till överdrag (DPOCKET), Positioneringskil (KIL)

StimuLITE Inkontinensinlägg Storlek (sittbredd x sittdjup)

Art. Nr.	Storlek
IN 1010	26 x 26 cm
IN 1212	31 x 31 cm
IN 1414	36 x 36 cm
IN 1616	41 x 41 cm
IN 1618	41 x 46 cm
IN 1816	46 x 41 cm
IN 1818	46 x 46 cm
IN 2020	51 x 51 cm

Passar alla dynor, placeras under dynan i överdraget, vita sidan upp!

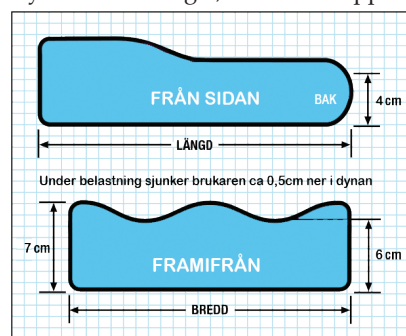

Önskar du en fastare dyna? StimuLITE Slimline XS finns med en fastare toppskick och heter då Slimline (Art. nr. SM)



Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Samtliga StimuLITE sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17
442 40 KUNGÄLV
Tel: 031-52 18 95
Fax: 031-52 18 92
goran@rehabshop.com
www.rehabshop.se