



StimuLITE®

SMART SITTDYNA

Luftgenomsläppligt
överdrag för bästa
möjliga ventilation



Kan tvättas i
maskin och
torktumlas

Perforerad
bikakestruktur för
bästa luftcirkulation,
för att förhindra
ansamling av fukt



Låg vikt:
mindre än 1 kg


Inkontinensinlägg
(tillbehör)

SMART - DEN PERFEKTA RULLSTOLSDYNA

StimuLITE® SMART sittdyna är en sittdyna för alla typer av rullstolar. Den är lätt att lyfta på grund av låg vikt, och är endast 5 cm hög. Du glider inte på dynan vilket underlättar vid körning av rullstol. Dynan är lätt att skötas och lätt att hålla ren genom att den tål maskintvätt 60 ° i 30 minuter. Dessutom ligger dynan still i rullstolen tack vare överdragets antiglidytta undertill. Överdraget har också ett bärhandtag och en greppring vid dragkedjan som underlättar av och påtagning av överdraget.

Du får ett svalt och luftigt sittande och den passar mycket bra för personer med känslig hud. Dess främsta egenskaper är:

- * Optimal tryckfördelning
- * Luft cirkulerar vilket ger torrt och svalt sittande
- * Mycket stabil tack vare cellernas följsamhet (anisotropisk)
- * Nästan skötselfri, kan maskintvättas och tål torktumling
- * Ingen volymförändring eller punktering
- * Vikt ca 1 kg, Höjd 5 cm
- * Kommer med ett svart överdrag i polyester
- * Inga lösa delar

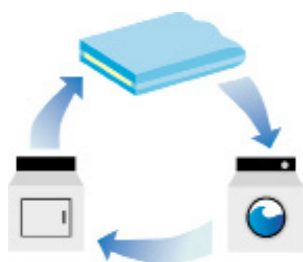

SMART rullstolsdyna är en förebyggande antidecubitusdyna med ett mjukt toppskikt för ömtålig och känslig hud. Dynan är luftgenomsläpplig och har även ett genomsläppligt överdrag. Alla StimuLITE dynor är gjorda av miljövänlig termoplastisk polyuretan som är format i sexkantig bikakestruktur. Materialet har en öppen cellstruktur som är ihålig och tillåter luft att cirkulera och fukt att avdunsta. Dynans utmärkta andningsförmåga, jämfört med andra sittdynor, hjälper till att hålla huden torr och sval. Dynan går också utmärkt att flytta med sig när man skall sitta i andra stolar under en längre tid, t.ex. bussar eller flygstolar. Den går också utmärkt att använda i varmt eller kallt väder då dess egenskaper inte förändras. Vill Du använda den i simhall eller på stranden går det bra. Blir den blöt "slår" du vattnet ur cellerna och torkar sedan med en handuk för att kunna sitta på dynan igen. Det kan vara skönt att veta att den är punkteringsfri samt att den inte har några lösa delar

SMART rullstolsdyna har 2 års garanti.



Total Pressure Management™

Förebygger Hudskörhet


Fuktighet "mjukar upp" huden och gör den skör. Fuktighet uppstår av svett och kroppsvätska.

Genom ett unikt ventilationssystem som StimuLITE SMART sittdyna

erbjuder med dess perforerade celler i bikakestruktur (honeycomb) och med ett luft-genomsläppligt överdrag kan luft cirkulera och fuktighet avdunsta. Detta gör att användaren kan hålla sig torr och sval. Dynan och överdraget kan maskintvättas och torktumlas vilket underlättar god hudhygien.



Andas och avdunstar fukt.

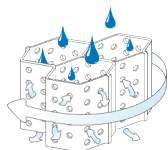


Komplett ventilationssystem

Tryckutjämning

StimuLITE SMART sittdynans cellkonstruktion former sig efter kroppen och fördelar trycket över en maximal yta, vilket också ger en mycket god komfort.

StimuLITE SMART sittdyna har en låg höjd på cellerna vilket betyder att personer utan känsel eller i hög risk att få trycksår ska överväga att använda StimuLITE Contoured eller StimuLITE Classic sittdyna.

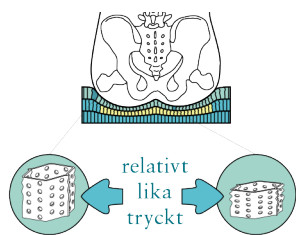


liten belastning

hög belastning

Fördelar tryck efter kroppsform

Reducerar skjuvkraft

Dynans laterala styvhet avgör hur mycket sjunvning och stabilitet dynan får. För mycket styvhet ökar skjuvkraften. Två skikt i olika styvhet i StimuLITE SMART dynan minimerar skjuvningen utan att göra avkall på stabiliteten. Det övre skiktet har en mindre lateral styvhet för att minska skjuvkraften mot huden. Den nedre skikten har större horisontalstyvhet för optimal stabilitet. Dynans stretchbara överdrag fungerar tillsammans med dynans överkikt till en mild skjuvkraft mot huden.

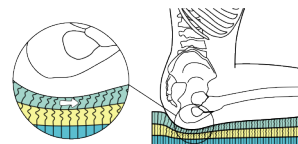

minimal skjuvkraft mot vävnader

Diffus lateral skjuvkraft

StimuLITE SMART Sittdyna


StimuLITE SMARTs sittdyna har låg vikt, är nästan skötselfri, och erbjuder mycket bra tryckutjämning. Dynan är lätt att hålla ren och kan tvättas i maskin samt torktumlas, vilket underlättar för inkontinenta personer. Den tvåskiktiga cellkonstruktionen erbjuder individuell anpassning och form, fördelar tryck samt ger stabilitet. Dynans perforerade cellkonstruktion tillåter luft att cirkulera och fukt att avdunsta så att sittytan förblir torr. Användaren håller sig torr och sval, även under pågående dagliga aktiviteter. Det unika ventilationssystemet reducerar risken för hudskörhet och erbjuder optimal tryckfördelning. Som extra tillbehör finns en liten väska som kan fästas med kardborre på dynans undersida, för nycklar, planbok.

Låg vikt - ca 1 kg
Tjocklek 5 cm
Max brukarvikt 130 kg.

StimuLITE SMART Sittdynor			
Storlek (sittbredd x sittedjup) x 5cm			
Art. Nr.	Storlek	Art. Nr.	Storlek
SMRT1316	33x41cm	SMRT1620	41x51cm
SMRT1414	36x36cm	SMRT1716	43x41cm
SMRT1416	36x41cm	SMRT1717	43x43cm
SMRT1418	36x46cm	SMRT1718	43x46cm
SMRT1420	36x51cm	SMRT1720	43x51cm
SMRT1516	38x41cm	SMRT1816	46x41cm
SMRT1517	38x43cm	SMRT1817	46x43cm
SMRT1518	38x46cm	SMRT1818	46x46cm
SMRT1520	38x51cm	SMRT1820	46x51cm
SMRT1616	41x41cm	SMRT2016	51x41cm
SMRT1617	41x43cm	SMRT2018	51x46cm
SMRT1618	41x46cm	SMRT2020	51x51cm
Max storlek: SMRT2020 plan botten (51x51cm)			
Överdrag: Cordura: COVSMRT + storlekskod Vattentätt: WPC + storlekskod Glidöverdrag: COVSP + storlekskod UIlfrotté: WCOVSMRT + storlekskod			
Tillbehör: Inkontinensinlägg (IN + storlek), ficka till överdrag (DPOCKET), positioneringskil (KIL)			

StimuLITE Inkontinensinlägg	
Storlek (sittbredd x sittedjup)	
Art. Nr.	Storlek
IN 1010	26 x 26 cm
IN 1212	31 x 31 cm
IN 1414	36 x 36 cm
IN 1616	41 x 41 cm
IN 1618	41 x 46 cm
IN 1816	46 x 41 cm
IN 1818	46 x 46 cm
IN 2020	51 x 51 cm

Passar alla dynor, placeras under dynan i överdraget, vita sidan upp!

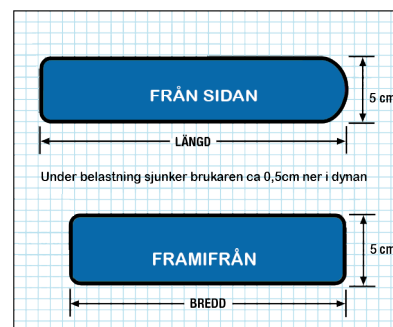

Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent #5,444,881 and other patents pending worldwide. Total Pressure Management is a trademark and Stimulite and Supracor are registered trademarks of Supracor Systems, Inc.

Samtliga StimuLITE sittdynor är brandtestade och godkända enligt ISO 7176-16 SS-EN 597:2015, SS-EN 1021:2006 samt CE-märkta.



GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17
442 40 Kungälv
Tel: 031-52 18 95
order@rehabshop.com
www.rehabshop.se